


Hinweis: Nach jedem Gebrauch ist eine Wartung erforderlich, um Kreuzinfektionen zu vermeiden und die Lebensdauer des Handstücks zu verlängern. Eine unsachgemäße Verwendung, Reinigung, Schmierung, Sterilisation oder Wartung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen, Komponenten beschädigen, die Lebensdauer verkürzen und die klinische Sicherheit beeinträchtigen.

Führen Sie nach jedem Gebrauch folgende Wartungsschritte durch:

Schritt 1: Vorreinigung

Entfernen Sie den unsichtbaren Schmutz von der Oberfläche des Handstücks mit einem weichen Tuch, das in 75%igen Alkohol getränkt ist; reinigen Sie die optischen Fasern am Kopf und am hinteren Ende vorsichtig mit einem in 75%igen Alkohol getränkten Wattestäbchen.


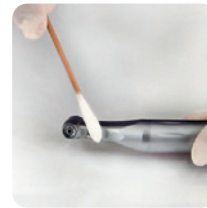


HINWEIS: Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und nur alkoholische Lösungen mit max. 75 % Alkoholgehalt verwenden.

Schritt 2: Reinigung und Trocknung

Reinigen Sie die Oberfläche des Handstücks 1–2 Minuten lang unter fließendem Wasser mit einem weichen Tuch.

Reinigen Sie die Bohrungsöffnung mit einer 0,6-mm-Bürste. Trocknen Sie die Oberfläche, die Bohrungsöffnung und die Feuchtigkeit im Inneren mit einer 3-Wege-Spritze ab.

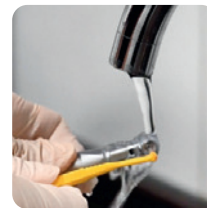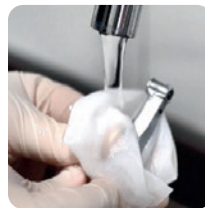

Schritt 3: Schmierung und Leerlaufbetrieb

Schmieren Sie die Innenbohrung des Kopfes und das hintere Ende des Handstücks mindestens 3 Sekunden lang, bis das austretende Schmiermittel klar ist.

Verwenden Sie das Drehzahlsteigerungsprogramm im Verhältnis 1:5 bei 2.000 U/min. Lassen Sie das Gerät 5–7 Sekunden lang vorwärts und rückwärts laufen. Wiederholen Sie den Schmiervorgang und den Leerlauf zweimal.



Schritt 4: Verpackung und Sterilisation

Entfernen Sie vor der Sterilisation überschüssiges Schmiermittel.

Legen Sie das Handstück in einen Sterilisationsbeutel, verschließen Sie diesen und legen Sie ihn auf die Sterilisationsschale. Sterilisieren Sie das Handstück mindestens 5 Minuten lang bei 134 °C.

