




FEATURES



DentalCAD® 3.2 Elefsina auf einen Blick

Neue Features, mehr Automatisierung und nahtlose Integration

- Mit dem Tool zur Reparatur von Präparationsgrenzen können Sie auch Intraoralscans nutzen, die nicht perfekt sind: Reparieren Sie Präparationsgrenzen und erhalten Sie so trotz Artefakten oder Löchern in den Scandaten ein geeignetes Ergebnis
- Sparen Sie Zeit mit dem Auto-Artikulator für automatische dynamische Okklusion*
- Integration von kompakten Fräsmaschinen: Wählen Sie Ihren bevorzugten Rohling und starten Sie die Fertigung nahtlos aus Ihrer CAD-Software heraus*
- Wechseln Sie Zahnbibliotheken unter Beibehaltung der vorherigen Aufstellung

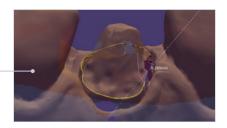




*Add-on Modul erforderlich

Smile Creator jetzt mit verbesserter Visualisierung und präoperativer Behandlungsplanung

- Designen Sie ein Lächeln mit virtueller Gingiva für hervorragende Ergebnisse
- Entwickeln Sie Ihr Smile Design auf Basis der natürlichen Zähne des Patienten
- Verbesserte 3D-zu-Foto-Ausrichtung: Passen Sie die 3D-Ansicht so an, dass die Darstellung zur Brennweite der Kamera passt

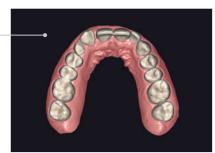

Schnelleres Design im Bite Splint Module

- Mehr Automatisierung beim Design von Aufbissschienen
- Designen Sie Aufbissschienen für beide Kiefer gleichzeitig



Verbessertes Full Denture Module

- Prothese kopieren: Anstatt eine alte Prothese zu unterfüttern, können Sie schnell und kostengünstig eine neue herstellen
- Designen Sie Prothesen auf Kugel-Attachments
- Add-on für das Ivotion™ Denture System jetzt verfügbar*



*Erwerb der Ivotion Bibliothek über Ivoclar erforderlich

iTero-exocad Connector™ definiert nahtlose Workflows neu


- Verbesserte Zusammenarbeit: Zahnärzte können nun externe fallbezogene Dateien (Bilder, Videos und Röntgenaufnahmen) über das MyiTero™ Portal mit ihrem Labor teilen
- Neue bidirektionale Fallkommunikation ermöglicht das Teilen von Designs in 3D
- Validieren Sie Präparationsgrenzen mithilfe der iTero-Intraoralkameraaufnahmen und der Zahnstrukturvisualisierung in iTero NIRI-Bildern



Neues Beta-Feature: Stiftaufbau*

- Design von **Stiftaufbau**-Restaurationen
- Eine zum Aufbau passende Krone kann direkt designt werden



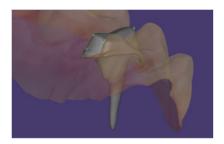

*Auf Anfrage für Beta-Tester verfügbar

exocad.com/dentalcad-elefsina

Gold Quadrat – Ihr exocad-Vertriebspartner: www.goldquadrat.de exocad GmbH

